


DIE NEUE GENERATION DER UTILA TRAGSTÜHLE

THE NEW GENERATION OF UTILA CARRYING CHAIRS

NEU
NEW



ALS-MAXX

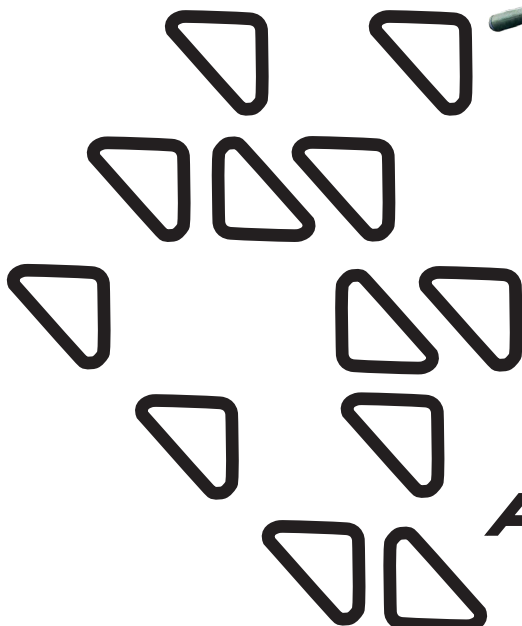

ALS-MAXX-PTX

Beratung und Vorführung Advice and demonstration

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

If you would like advice or would like to see products before making your purchase decision, one of our product advisors will be happy to visit you.

utila Gerätebau GmbH + Co. KG
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@utila.de
www.utila.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der utila Gerätebau GmbH & Co. KG gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

This catalog shows models, equipment scopes and configuration options of the products supplied by utila Gerätebau GmbH & Co. KG for the German market. In other countries of the European Union, there may be deviations from the equipment scopes described or shown in this catalog in terms of standard and special equipment.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich um CE konforme Medizinprodukte.

The models shown in this catalogue are all CE compliant medical devices.



PI MAXX 20260430
©2026 utila Gerätebau GmbH + Co. KG
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.
Technical and editorial changes reserved.





ALS-MAXX ALS-MAXX-PTX

Die Tragstühle ALS-MAXX und ALS-MAXX-PTX sind für den professionellen Einsatz konzipiert und dienen zum Transport eines sitzenden Patienten.

Die Tragstühle können treppab und treppauf getragen und ebenerdig gerollt oder getragen werden. Die Tragstühle kommen dort zum Einsatz, wo die Raumverhältnisse die Benutzung herkömmlicher Tragen nicht zulassen.

Der Tragstuhl ALS-MAXX-PTX ist zusätzlich mit dem abnehmbaren PowerTraxx™ Raupensystem ausgestattet. Mit dem Raupensystem kann der Tragstuhl Treppen hinauf und hinunter gefahren werden, ohne dass die Anwender den Tragstuhl tragen müssen.

Das PowerTraxx™ Raupensystem wird von einem wiederaufladbaren 28 V DC Akku angetrieben (im Lieferumfang enthalten).

Mit den Tragstühlen können Patienten in sitzender Stellung im Fahrzeug transportiert werden.



The ALS-MAXX and ALS-MAXX-PTX carrying chairs are designed for professional use and are used to transport a seated patient.

The carrying chairs can be carried up and down stairs and rolled or carried at ground level. The carrying chairs are used where space constraints prevent the use of conventional stretchers.


The ALS-MAXX-PTX carrying chair is also equipped with the removable PowerTraxx™ system. The system allows the chair to be moved up and down stairs without the user having to carry the chair.

The PowerTraxx™ system is powered by a rechargeable 28 V DC battery (included).

The carrying chairs can be used to transport patients in a seated position in a vehicle.

ALS-MAXX

NEU
NEW

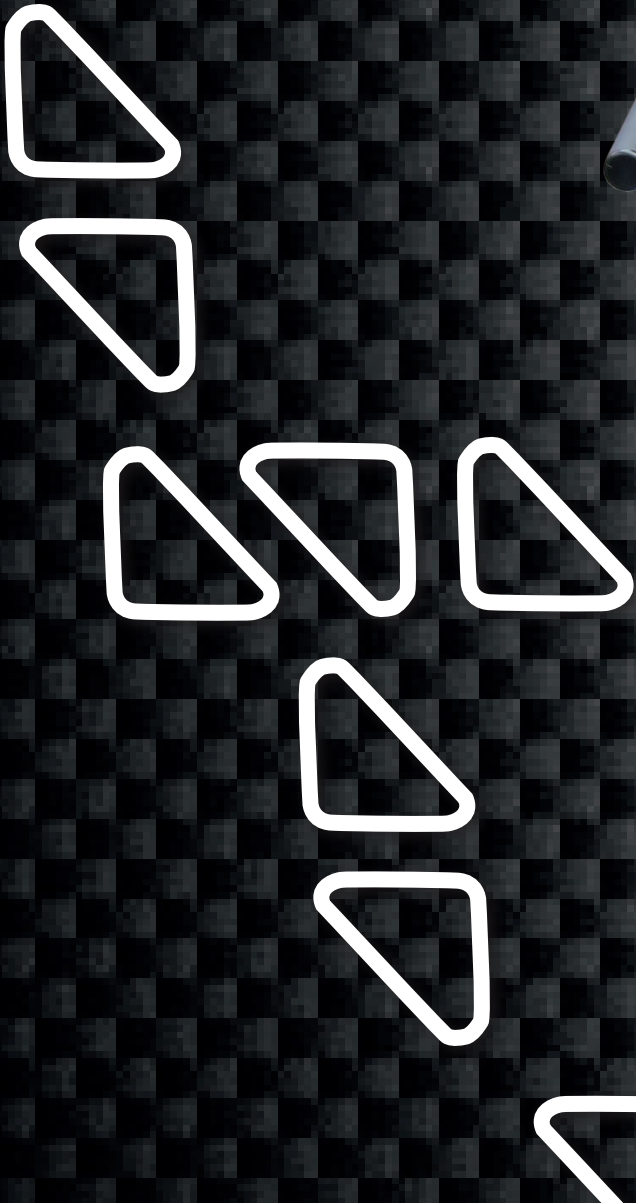



ERGONOMISCHE SITZ- UND RÜCKENSCHALE AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM, LEICHT ZU REINIGENDEM CARBON

ERGONOMIC SEAT AND BACK SHELL MADE OF DURABLE, EASY-TO-CLEAN CARBON


STANDARD AUSSTATTUNG

- Hochwertige Aluminiumkonstruktion
- Weiß pulverbeschichtet
- Ergonomischer Führungsbügel mit neuer CROCO Beschichtung
- Vordere ausziehbare ergonomische Traggriffe (2 Positionen) mit Sicherung
- Klappgriffe hinten
- Klappbare Armlehnen
- Ausziehbare (2 Positionen), klappbare und arretierbare Fußstütze
- Hintere Laufrollen mit Feststellbremse - 200 mm Ø
- Vordere Schwenkrollen mit Feststellbremse - 200 mm Ø
- Ergonomische Sitz- und Rückenschale aus widerstandsfähigem, leicht zu reinigendem Carbon
- Rücken- und Sitzpolster mit „EASY“ Klick-Befestigung
- Hosenträgerbegurtung
- Beckengurt
- Fußgurt
- Arretierpilze für Bodenhalterung BH 501 E / M / AIR / AIR-A

STANDARD EQUIPMENT

- High-quality aluminum construction
- White powder-coated
- Ergonomic guide bar with new CROCO coating
- Front extendable ergonomic carrying handles (2 positions) with safety lock
- Folding handles at the rear
- Foldable armrests
- Extendable (2 positions), foldable and lockable footrest
- Rear castors with parking brake - 200 mm Ø
- Front swivel castors with parking brake - 200 mm Ø
- Ergonomic seat and back shell made of durable, easy-to-clean carbon
- Back and seat cushions with „EASY“ click fastening
- Shoulder harness
- Lap belt
- Foot strap
- Locking mushrooms for floor mount BH 501 E / M / AIR / AIR-A

ALS-MAXX
ALS-MAXX-PTX

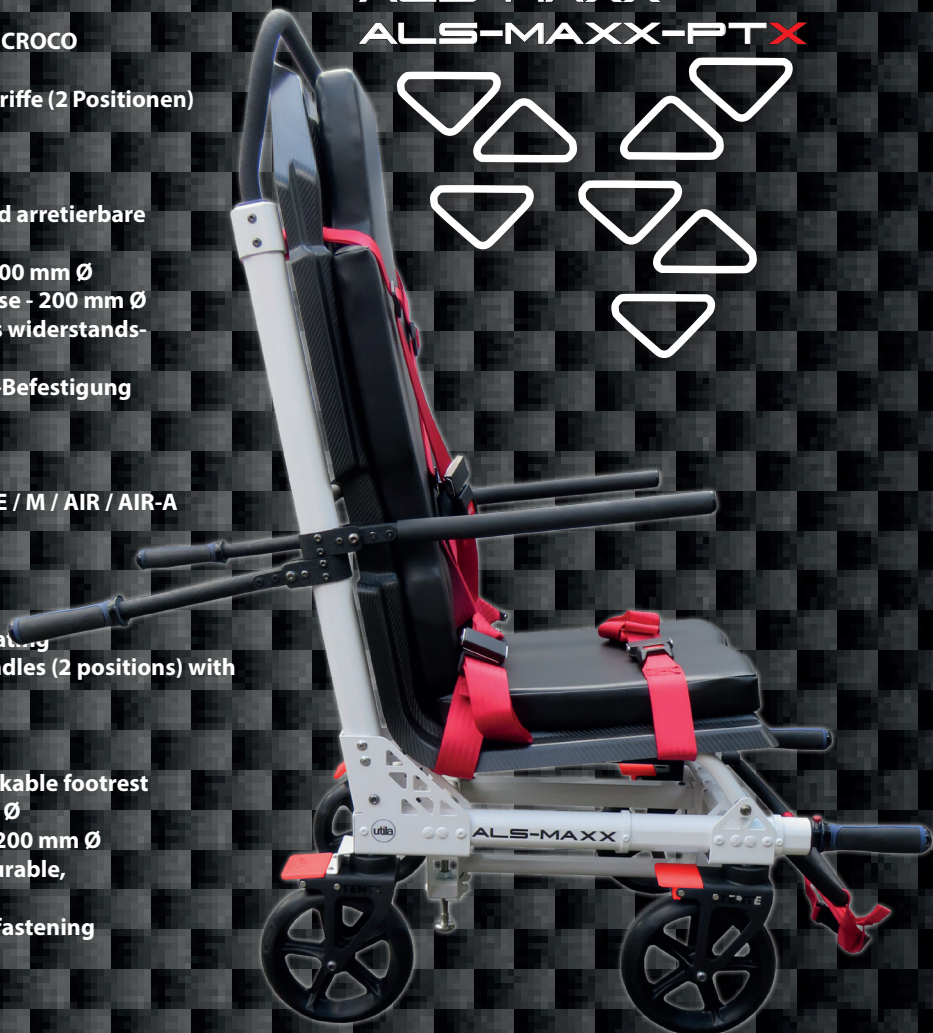

ALS-MAXX-PTX

Extra Ausstattung


- Abnehmbares elektrisches PowerTraxx™ Raupensystem bewegt den Tragstuhl treppauf oder treppab
- Bedieneinheit mit Wippschalter (Kontrolle der Gleitriemenumdrehungsgeschwindigkeit und der Laufrichtung)
- Automatisches Raupenschienenbremssystem (Gleitriemenbewegung wird gestoppt, wenn die Wippschalter nicht gedrückt werden)
- Ladekontrollanzeige auf Batterie u. Bedienpult
- Ein- und Ausschalter mit Kontrolllicht
- Umgebungslicht an der Motoreinheit
- Ergonomischer Führungsbügel am oberen Tragstuhlrahmen mit neuer CROCO Beschichtung in 4 Positionen verstellbar
- Akku und Aufladegerät

Extra equipment

- Detachable electric PowerTraxx™ system moves the chair up or down stairs
- Control unit with rocker switch (control of the sliding belt rotation speed and direction)
- Automatic track braking system (The track belt movement stops when the rocker switches are not pressed)
- Charge control indicator on battery and control panel
- On/off switch with indicator light
- Ambient light on the motor unit
- Ergonomic guide bar with new CROCO coating on the upper chair frame adjustable in 4 positions
- Battery and charger



UMGEBUNGSLICHT AN DER MOTOREINHEIT AMBIENT LIGHT ON THE MOTOR UNIT

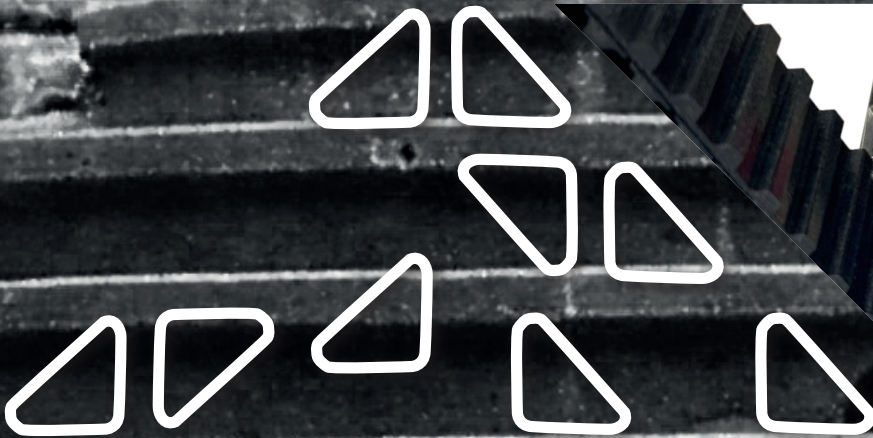



utia


ALS-MAXX-PTX

utia



ALS-MAXX ALS-MAXX-PTX

**ERGONOMISCHER FÜHRUNGSBÜGEL
ERGONOMIC GUIDE BAR**

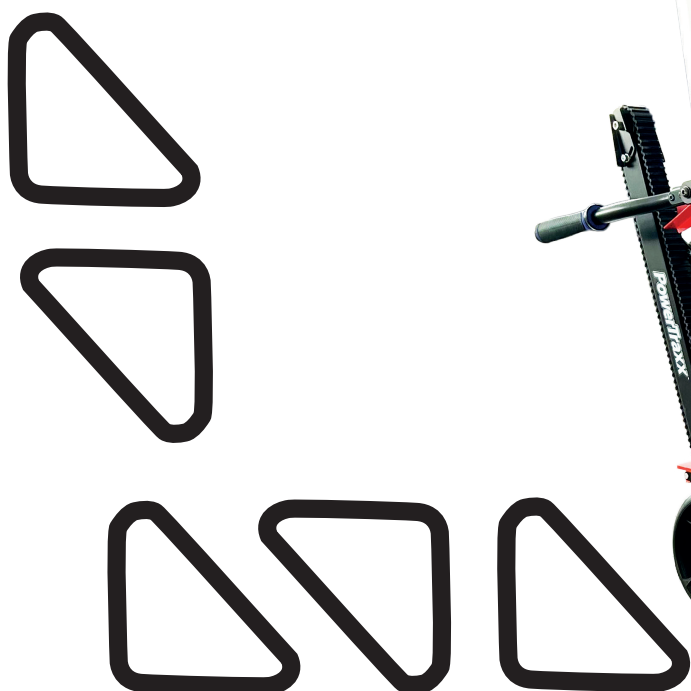

Tragstuhl / Carrying chair

Länge - Griffe eingeschoben / Length - handles retracted	898 mm
Länge - Griffe ausgezogen / Length - handles extended	1 437 mm
Breite - gesamt / Width - total	535 mm
Höhe / Height	1 250 mm
Sitzhöhe ohne Auflage / mit Auflage / Seat height without cushion / with cushion	420 / 470 mm
Gewicht ALS-MAXX / Weight ALS-MAXX	22 kg
Gewicht mit PTX (inkl. Akku) / Weight with PTX (incl. battery)	40 kg
max. Belastbarkeit / max. load capacity	200 kg
Stromleistung / Power (nur PTX / PTX only)	28 V DC
normale Ladezeit / normal loading time (nur PTX / PTX only)	ca. 1 Std.



**HOHE BELASTBARKEIT
HIGH LOAD CAPACITY**

PTX

Höhe / Height	740 mm
Breite / Width	390 mm
Tiefe / depth	125 mm
Gewicht ohne Akku / Weight without battery	12 kg

EINFACHE BEDIENUNG
EASY TO USE

ERGONOMISCHE SITZ- UND RÜCKENSCHALE AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM, LEICHT ZU REINIGENDEM CARBON

ERGONOMIC SEAT AND BACK SHELL MADE OF DURABLE, EASY-TO-CLEAN CARBON

ERGONOMISCHE TRAGGRIFFE
ERGONOMIC CARRYING HANDLES

200 MM Ø GROSSE LAUFRÄDER
200 MM Ø BIG WHEELS



ALS-MAXX-PTX

EINFACHE BEDIENUNG
EASY TO USE



PowerTraxx VIDEO

SPITZHAUSTREPPE - 220 METER LANG
80 HÖHENMETER - 397 TREPPENSTUFEN
70 KG - EIN AKKU

SPITZHAUS STAIRCASE - 220 METERS LONG
80 METERS ELEVATION - 397 STEPS
70 KG - ONE BATTERY

Schauen Sie sich das Video vom PowerTraxx System im Einsatz an (hier am ALS 328 PTX) und lassen Sie sich überzeugen.

Watch the video of the PowerTraxx system in action (here on the ALS 328 PTX) and see for yourself.




ALS-MAXX ALS-MAXX-PTX

OPTIONALES ZUBEHÖR / OPTIONAL ACCESSORIES

OPTIONAL KÖNNEN BEIDE TRAGSTÜHLE MIT RICHTUNGSFESTSTELLER FÜR DIE VORDEREN SCHWENKROLLEN AUSGESTATTET WERDEN

OPTIONALLY, BOTH CARRYING CHAIRS CAN BE EQUIPPED WITH DIRECTIONAL LOCKS FOR THE FRONT SWIVEL CASTORS

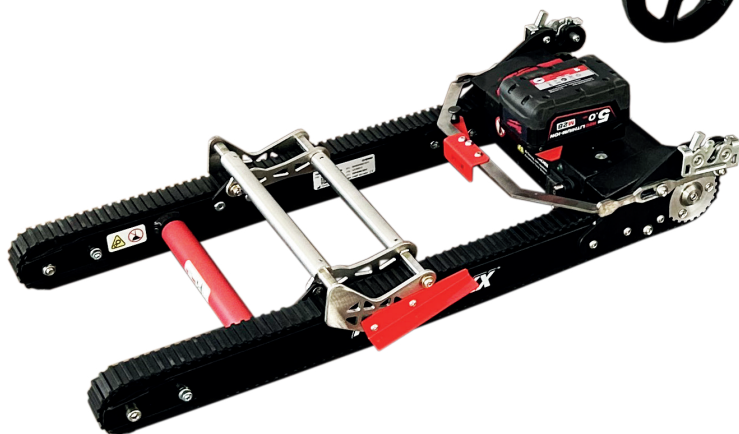

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Bodenhalterung / Floor Fastener

BH 501 MIE | AIR | AIR-A

Beim Einschieben sichert die automatische Verriegelung den Tragstuhl, sobald die Endstellung in der Bodenhalterung erreicht ist.

When pushed in, the automatic locking mechanism secures the chair as soon as it reaches its end position in the floor mount.



Wandhalterung WH-PTX Wall Fixation WH-PTX



Diese Wandhalterung ist speziell für den abnehmbaren PowerTraxx Raupenantrieb entwickelt worden. Der PowerTraxx Raupenantrieb wird in der Halterung mit wenigen Handgriffen im Fahrzeug untergebracht und gesichert.

This wall mount was specially developed for the removable PowerTraxx track drive. The PowerTraxx track drive is easily installed and secured in the vehicle using the mount.



WH-PTX



RTP-MAXX

Rückentragopolster RTP-MAXX Back support pad RTP-MAXX

Zusätzliche Polsterung am oberen Rahmen des Tragstuhls für eine bequemere Handhabung beim Tragen.

Additional padding on the upper frame of the carrying chair for more comfortable handling when carrying.

Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der utila Gerätebau GmbH & Co. KG gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich um CE konforme Medizinprodukte.

PI MAXX 20260430
utila Gerätebau GmbH + Co. KG

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.
Technical and editorial changes reserved.

This catalog shows models, equipment scopes and configuration options of the products supplied by utila Gerätebau GmbH & Co. KG for the German market. In other countries of the European Union, there may be deviations from the equipment scopes described or shown in this catalog in terms of standard and special equipment.

The models shown in this catalogue are all CE compliant medical devices.

utila Gerätebau GmbH + Co. KG
Zobelweg 9
53842 Troisdorf
Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@utila.de
www.utila.de

